

# Waagen (DAkks)

## Wartungs- und Kalibrierservice



Während der Vor-Ort-Wartung und Kalibrierung unterziehen wir Ihre Waage einer generellen Funktionsprüfung, beurteilen den Standort und die damit verbundenen Einflussfaktoren auf den Wägeprozess und reinigen das Instrument äusserlich. Stellen wir während der eigentlichen messtechnischen Überprüfung (Kalibrierung) eine grosse Abweichung fest, führen wir eine Justage durch und wiederholen die Kalibrierung. Der gesamte Kalibrierprozess wird genau dokumentiert, eine Kalibriermarke an der Waage angebracht und der entsprechende DAkks-Kalibrierschein ausgestellt.


Auf dem DAkks-Kalibrierschein werden folgende Messparameter ausgewiesen:

- Wiederholbarkeit
- Linearität
- Exzentrizität
- Messunsicherheit während der Kalibrierung
- Unsicherheit der Waage im Gebrauch
- Mindesteinwaage

Wir führen die Kalibrierung der Waagen an ihrem Standort gemäss unseren zertifizierten und akkreditierten Prozessen durch (DAkks-Akkreditierung / ISO 17025). Dabei berücksichtigen wir die neueste Kalibrierrichtlinie Euramet-Norm cg-18/V4.0 und verwenden für alle Arbeiten ausschliesslich zertifizierte und rückführbare Hilfs- und Messmittel.

## Leistungsbeschreibung

- Sichtkontrolle inkl. Typenschildkontrolle
- Standortkontrolle inkl. nivellieren sofern notwendig
- Funktionskontrolle
- Aussenreinigung
- Messtechnische Überprüfung inkl. Justierung sofern notwendig
- Ausstellung eines DAkks-Kalibrierscheins
- Anbringung der Kalibriermarke inkl. Link auf PDF Zertifikat
- Bewertung Mindesteinwaage gem. USP General Chapter 41

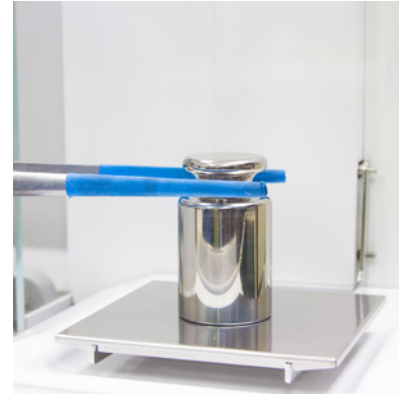

Akkreditierte und rückführbare DAkks-Kalibrierung (ISO 17025)



**ISO 9001  
CERTIFIED**



### HAUPTSITZ

Hi-Tec-Support GmbH  
Wanistrasse 7  
CH-8422 Pfungen  
Tel.: +41 52 214 33 00  
Fax: +41 52 214 33 05



### NIEDERLASSUNG DE

Hi-Tec-Support GmbH  
Hohenzollernring 57  
DE-50672 Köln  
Tel: +49 221 16025351



### SERVICEPUNKT NORD

Hi-Tec-Support GmbH  
Service Nord  
Kielstrasse 103  
DE-22769 Hamburg  
Tel: +49 221 16025351

[info@hi-tec-support.com](mailto:info@hi-tec-support.com)  
[www.hi-tec-support.com](http://www.hi-tec-support.com)

**HI-TEC™**  
support